

LUTRONIC

ACTION II

Solutia ta 360° pentru Estetica Faciala
si Ginecologie Cosmetica

REJUVENARE & STRALUCIRE
DUBLA FRACTIONATA


Er:YAG Laser Estetic: Inovatie 4 in 1



ACTION II

Action II este o platforma laser Er:YAG de inalta performanta cu aplicabilitate pentru o gama larga de proceduri estetice. Cu platforma Action II nu mai exista limitatii pentru rejuvenarea conventionala si coagulare. Aparatul prezinta un mod normal pentru rejuvenare laser si un mod puls lung pentru coagulare. Latimea maxima a pulsului de 1000 ms (in modul puls lung) extinde posibilitatile de tratament. Tehnologia fractionata specializata si tehnologia Shining Peel ofera o rejuvenare delicata si reda stralucirea naturala a pielii.

Action II Petit Lady include toate procedurile de tratament pentru o varietate de aplicatii ginecologice. Procedura Petit Lady nu este o vaginoplastie laser, ci o procedura non-invaziva si non-chirurgicala. Ablatia precisa si controlata a tesutului alaturi de coagularea minima sunt induse de energia laserului Er:YAG. Deoarece reepitalizarea mucoasei vaginale este mai rapida cu Action II comparativ cu alte lasere, procedura este o alternativa sigura si non-invaziva pentru pacienti si ginecologi. Modul Dual unic combina in mod automat micropulsurile multiple si modul puls lung simultan. Aceasta noua abordare a tratamentului permite actiunea unui efect termic secundar adanc si a unei incalziri controlate a membranei mucoase a peretelui vaginal. Designul patentat al aplicatorilor intravaginali ofera o procedura mai eficienta si mai confortabila.

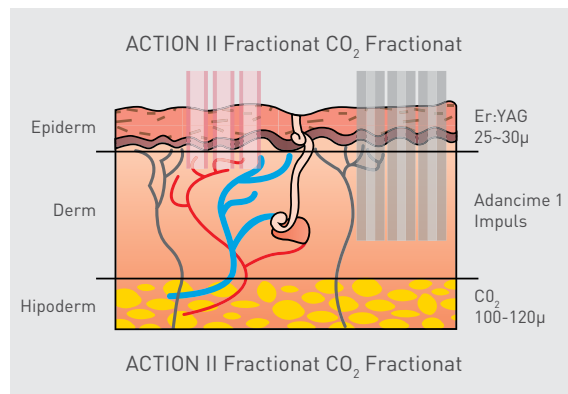

OFERA REZULTATELE CERUTE DE CATRE PACIENTI

Optiuni Complete de Tratament Fractionat

Mod Dual Fractionat

Laserul poate fi folosit in modul "Fractionat" si "Puls Lung". Tehnologia fractionata a ACTION II permite o adancime precisa a ablatiei si controlul coagularii in contextul unei proceduri fara durere. Laserul fractionat utilizat in modul Puls Lung accelereaza procesul de vindecare si minimizeaza timpul de recuperare.

Tehnologie de Livrare a Impulsurilor Multiple

Tehnologia specializata de livrare a impulsurilor multiple permite ajustarea adancimii zonei de ablatie si a zonei termale de coagulare. Acumulare de pana la 10 impulsuri la atingerea unui singur buton.

Tehnica Dinamica de Miscare

Tehnica dinamica de miscare permite scurtarea timpului procedurii.

Mod Triplu de Operare

- Mod Normal
- Mod Fractionat
- Mod Puls Lung (Max 1,000 ms) : este disponibila si abordarea fractionata.





Procedura non-invaziva si non-chirurgicala | Fara sangerare, fara durere, fara cicatrici | Usor si simplu de operat | Procedura confortabila cu timp scazut de recuperare | Procedura sigura si de incredere cu o tehnologie dovedita Er:YAG.

Rejuvenarea Vaginala Petit 360°


Ablatia delicata si efectul fototermic generat de micropulsuri multiple livrate precis in mucoasa vaginala stimuleaza neocolageneza si reduce laxitatea canalului vaginal, rezultatul fiind rejuvenarea vaginalului.

Tratarea Incontinentei Urinare cu Petit 90°


Aceasta abordare non-chirurgicala prin canalul vaginal cu aplicatorul Petit 90° ofera un efect termal inbunatatit si o reducere a laxitatii prin stramtorarea fasciei endopelvine, ligamentului si tesutului mucos al canalului vaginal anterior, dar si pentru a trata incontinenta urinara.

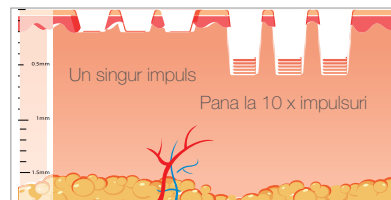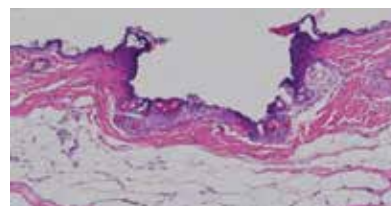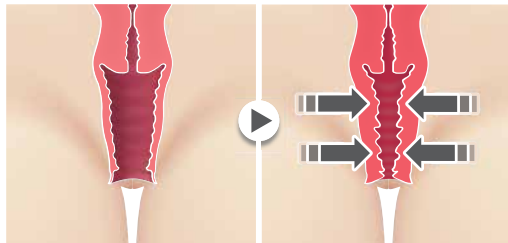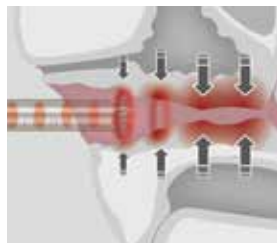

Livrarea Impulsurilor Multiple

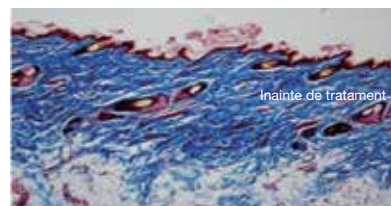


Inainte de tratament

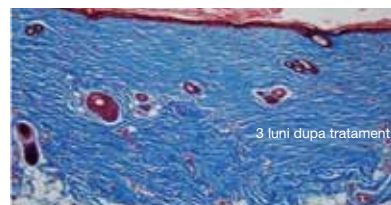

3 luni dupa tratament

Cresterea numarului total de fibre de colagen si elastina dupa tratament Fractionat HVP: 15 mJ x 8 impulsuri multiple

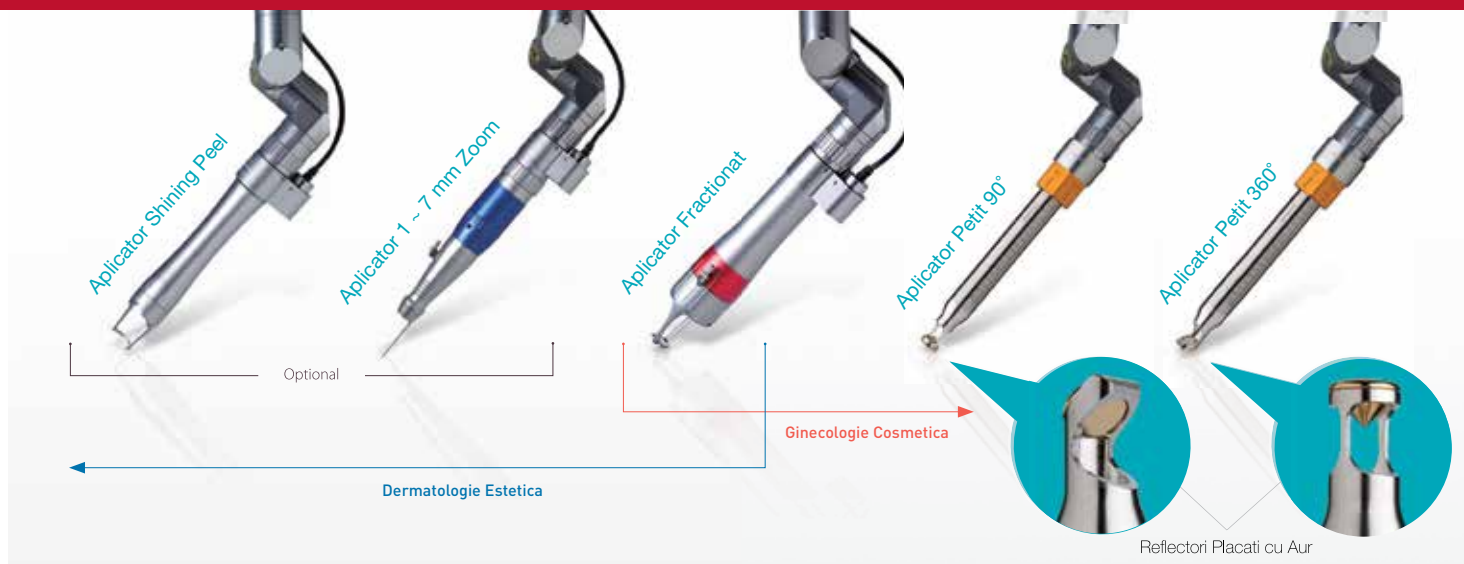

Proceduri non-invasive dedicate pacientului, cu diversi aplicatori pentru indicatii multiple in ginecologia cosmetica si dermatologia estetica

* Patentarea designului aplicatorilor Petit este in desfasurare

Indicatii

Peeling, Rejuvenare Dual Fractionata, Cicatrici Acneice, Cicatrici Chirurgicale, Pori Largiti, Tonus si Riduri, Nevi si Pigmenti Epidermali: Lentigo, Pistrui, Keratoza seboreica, Siringioame, Negi.



Inainte



Dupa



Inainte



Dupa



Inainte



Dupa



Inainte




Dupa

Petit Lady: Variante Multiple de Tratament

Trateaza Laxitatea Canalului Vaginal/
Rejuvenare Vaginala


- » Atrofie Vaginala
- » Rejuvenare Totala Vaginala
- » Incontinenta Urinara
- » Uscaciune Vaginala
- » Senzatie de Arsură
- » Vulva Pigmentata

Pasul 1: Micropulsuri multiple

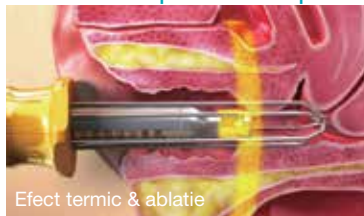


Efect termic & ablatie

Pasul 2: Puls Lung Unic

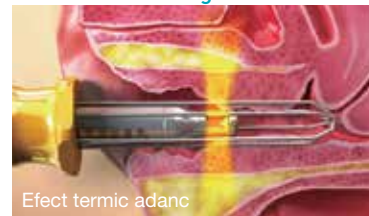


Efect termic adanc

Pata Elastica van Giesen X 100, Varsta: 38 ani

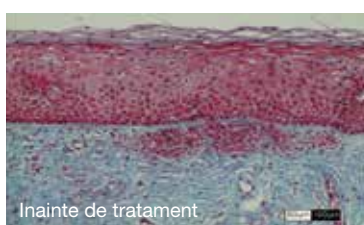

Inainte de tratament

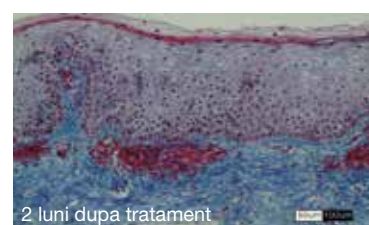

2 luni dupa tratament

DE CE ACTION II?

- Varietate de indicatii ginecologice si abordari estetice
- Capacitati Totale Fractionare + Efect Termic Secundar de Adancime (Mod Dual)
- Mod Puls Lung: Durata puls - 1,000 ms
- Tratamente Rapide, Sigure, cu Risc Scazut si Timp de Recuperare Scurt
- Rejuvenare Delicata cu ajutorul aplicatorului de Peeling pentru Stralucire

ACTION II - INTERFATA UTILIZATOR (GUI)

GUI - Dermatologie



GUI - Ginecologie (Petit Lady)



SPECIFICATII SISTEM

Tip Laser

Er:YAG 2940 nm

Mod de operare

Dermatologie

Mod Normal
Mod Puls Lung
Mod Fractionat



Ginecologie (Petit Lady)

Mod Multiplu
Mod Puls Lung
Mod Dual

Profil Beam

Top Hat

Latime Puls

Mod Normal: 250 s
Mod Puls Lung: max 1000 ms

Aplicatori

Fractionat H/P	12mmØ, 9x9 mm
Zoom H/P (Optional)	1 ~ 7 mmØ
Shining Peel H/P (Optional)	14 mmØ
Petit H/P	360°
	90°

Aplicator Auto-Detectare

Da

Rata Puls

Individual, 1, 2, 5 si 10 Hz

Interfata Utilizator

Display LCD 8 inch / Ecran tactil

Memorie

"Shining Peel" & 8 point

Fascicul directionat

Dioda 655 nm (Rosu), 1 mW, Luminozitate Reglabila

Dimensiuni (mm) / Fara brat

872 (H) x 656 (L) x 295 (W)



Medisk!n

APARATURA MEDICAL-ESTETICA

Adresa: Str. Melodiei 23, Sector 2, Bucuresti
Telefon: +40.752.334.433 | Email: office@mediskin.ro
Web: www.mediskin.ro