

noul



MORPHEUS PRO

by INMODE

Platforma Morpheus PRO de la InMode livreaza tratamente fractionate cu ajutorul aplicatorului puternic si versatil Morpheus8.

Morpheus PRO ofera un tratament *gold standard* de microneedling si radiofrecventa fractionata, devenind foarte popular la nivel international. Morpheus8 are un succes incontestabil in intreaga lume datorita celor peste un milion de tratamente realizate in deplina siguranta si cu rezultate vizibile inca de la prima sedinta.

Datorita capetelor de tratament disponibile intr-o gama variata, Morpheus8 poate livra tratamente complete de remodelare faciala si corporala.

- Netezeste ridurile si liniile fine
- Trateaza cicatricile atrofice si acneice
- Imbunatateste aspectul acneei active
- Netezeste iregularitatile pielii
- Imbunatateste tonusul pielii
- Contureaza fata, gatul si alte zone ale corpului
- Reduce aspectul celulitei
- Reduce vergeturile



REMODELARE FRACTIONATA
PENTRU INTREGUL CORP

MORPHEUS8

BENEFICII

- Efectueaza un tratament fractionat profund si sigur, cu o penetrare programabila de la 1 - 7 mm, in functie de configuratie
- Datorita stratului de polimer ce acopera micro-pinii, nu exista o deteriorare termica a epidermei
- Trateaza in siguranta pana la fototipul VI de piele cu un risc redus de PIH
- Capatul de unica folosinta previne contaminarea
- Designul avansat al retelei de electrozi creeaza un efect termic uniform

Morpheus PRO ofera cea mai profunda remodelare a tesutului adipos subdermal pentru fata si corp disponibila pe piata. Morpheus PRO este un punct de referinta in materie de microneedling deoarece livreaza energia in mod optim pentru a reduce laxitatea, a topi grasimea superficiala si a reconecta reseaua fibroseptala.

Platforma Morpheus PRO poate fi dotata si cu aplicatorul Forma care ofera un tratament non-invaziv de reducere a laxitatii pielii. Pacientii pot beneficia de un efect de lifting impresionant si, totodata, de o mentinere mai buna a rezultatelor in timp.

In aceasta configuratie, platforma Morpheus PRO va permite sa oferiti satisfactie pacientilor, sa va maximizati optiunile de tratament in functie de asteptarile lor si sa obtineti cel mai bun ROI pentru clinica dumneavoastra.

FORMA®

SINGURUL APLICATOR TERMIC NON-INVAZIV CU AUTO-REGLARE PENTRU STIMULAREA NEOCOLAGENEZEI

- Aplicator termic automat pentru reducerea laxitatii, cu monitorizare a temperaturii si radiofrecventei datorita sistemului integrat de pornire / oprire a energiei RF (ACE)
- Fara durere si fara timp de recuperare
- Temperatura programabila de catre medic (38 – 43°C)
- Monitorizarea permanenta a temperaturii de la nivelul pielii
- Distribuirea uniforma a caldurii
- Expunerea prelungita la o temperatura optima pentru a obtine cele mai bune rezultate de tonifiere cutanata, in mod non-invaziv



| | | |
|--------------|-------------|---|
| Specificatii | Putere RF | Pana la 65 W |
| | Frecventa | 1 MHz |
| | Temperatura | Masuratori ale temperaturii in timp real setate de medic sau terapeut, pana la 43°C |


SPECIFICATII

NUMAR DE MICRO-ACE 12, 24, 40 micro-ace acoperite cu polimer (exceptie facand capatul distal de 0.5mm)


MODURI DE OPERARE Cycle – Micro-acele patrund si se retrag din tesut, cu fiecare puls
 Fixed – Micro-acele intra superficial in piele si pulsurile RF sunt livrate cu o rata de repetitie predeterminata, in acelasi loc
 Burst – Micro-acele patrund si livreaza energie RF pe mai multe niveluri de adancime, intr-un singur ciclu de penetrare

PERFORMANTA Reteaua de electrozi inconjoara simetric fiecare micro-ac pentru uniformitatea profilului termic si sincronizarea automata intre penetrare si livrarea energiei RF

TRATAMENTE IN FUNCTIE DE CONFIGURATIE CAPAT ADANCIMEA DE PENETRARE

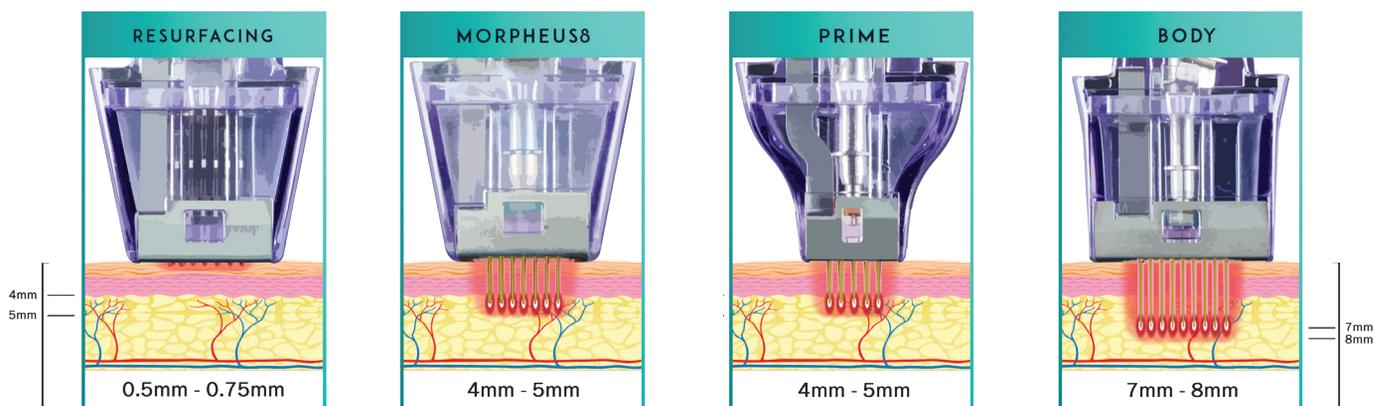

| RESURFACING | MORPHEUS8 | PRIME | BODY |
|--|---|--|---|
| 24 pini | 24 pini | 12 pini | 40 pini |
| 0.5mm, fix | 1-4mm | 1-4mm | 2-7mm |
| Refacerea epidermica a stratului superficial al pielii | Remodelare dermala si subdermala pentru fata, gat si diferite zone ale corpului | Remodelare dermala si subdermala a zonelor mici, precum cea periorbitala, periorala si zona intima | Remodelare dermala si subdermala a zonelor mari, precum abdomen, coapse si fese |

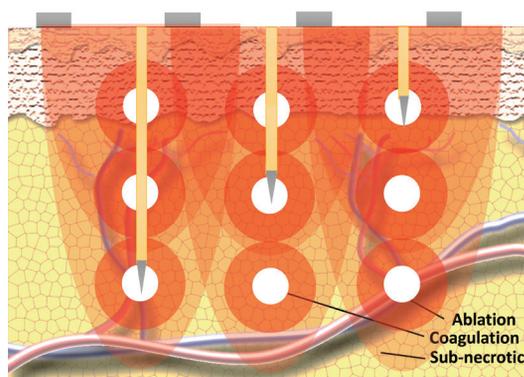

Morpheus8 Body Burst
Setarea personalizata multi-puls

| Specificatii | Setarea ciclului | Ciclu de penetrare pe mai multe niveluri |
|--------------|------------------|--|
| | 7 mm | 7 mm, 5 mm, 3 mm |
| | 6 mm | 6 mm, 4 mm, 2 mm |
| | 5 mm | 5 mm, 3 mm |
| | 4 mm | 4 mm, 2 mm |

INAINTE & DUPE

REJUVENARE PERIORBITALA



DR. B. FORLEY

REJUVENARE ABDOMEN



DR. T. SHIMER



DR. T. SHIMER

GENUNCHI




DR. G. STEVENS

BRATE



DR. G. STEVENS

REJUVENARE ZONA GATULUI

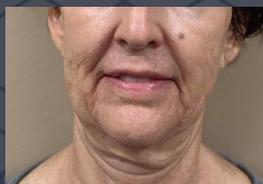

DR. D. PROKUPEK



DR. C. MIZGALA



DR. D. PROKUPEK



DR. P. ROVATTI