

PICOSURE[®] *pro*
by CYNOSURE[®]



Arta
PERFORMANȚEI



Prezentare *PicoSure Pro* /

Elimină pigmentul nedorit pentru **toate tipurile de piele**

Reduce ridurile, liniile fine, cicatricile provocate de acnee și dimensiunea porilor, **fără timp de recuperare**

Îmbunătățește tonul și textura generală a pielii; oferind pacienților un ten mai luminos, **mai strălucitor și mai radiant**

Singurul dispozitiv cu durată de picosecunde aprobat FDA pentru tratarea melasmei pigmentare, nevusului Ota și nevusului Hori

Tratament *de 10 minute* /

Lentile de focalizare Platinum cu **40% mai multe cadre**

4 aplicatori ficși cu **fluență reglabilă** (aplicator de 5 mm)

1 aplicator Zoom | 2-6 mm

Lungimi de undă opționale de **532 nm** și **1064 nm** pentru îndepărtarea tatuajelor

Noul mod Turbo pentru tatuaje greu de tratat

755 nm.
10 minute.
Rezultate de neegalat.

Revitalizarea pielii fără timp de recuperare.



Descoperiți *PicoSure Pro*

Oferiți o varietate de tratamente, fiecare fiind cercetat și dezvoltat cu atenție, având în vedere interesele pacienților dumneavoastră. Pasiunea pentru artă și știință înglobează tratamentele de revitalizare a pielii pentru a oferi pacienților rezultatele dorite.

Cercetarea științifică de neegalat și cele mai noi tehnologii laser de tip picosecondă de pe piață vă vor permite să vă duceți practica medicală la noi niveluri, oferind în același timp pacienților cele mai bune rezultate posibile.



Revoluționarea industriei laserului de picosecunde/

Primul pe piață

Cynosure a inventat primul laser picosecond de 755 nm din lume, revoluționând industria esteticii.

Sigur și dovedit clinic

Existenta a mai multor studii clinice în comparație cu orice alt dispozitiv similar, peste 83 de publicații clinice.

Fiabilitate și service


Fabricat în S.U.A.

Brand de încredere la nivel global


Peste un milion de tratamente efectuate cu succes.

Platinum *Focus™* Lens

Tratează liniile fine, ridurile, cicatricile provocate de acnee și porii dilatați fără timp de recuperare.

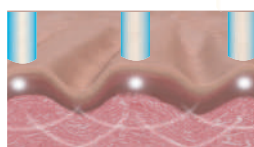


Energia de intensitate joasă și de intensitate înaltă creează o leziune delicată în epidermă, numită leziune optică intraepidermică indusă de laser sau LIOB. Pe măsură ce se formează LIOBs, se creează o undă de presiune care se extinde în derm.

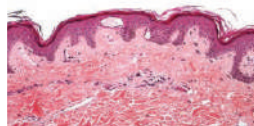

Histologia arată formarea de LIOB în epidermă.




Unda de presiune activează răspunsul natural de vindecare al organismului pentru a crește producția de collagen și elastină fără efectele secundare termice sau perioadă de recuperare compatibile cu alte tratamente lasere.

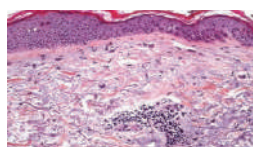

Histologia arată răspunsul dermic care duce la producerea de collagen și elastină noi.

Lentile *Plate*

Tratează pigmentarea nedorită pentru toate tipurile de piele.

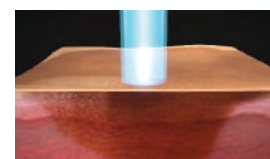

Descompune eficient pigmentul nedorit în nano particule, care sunt absorbite și eliminate în mod natural de organism.





Elimină vizibil pigmentul epidermic și dermic fără a afecta pielea înconjurătoare.



Puterea de 755 nm /

Tratați în *siguranță* și *eficient*
toate problemele de piele ale
pacienților dumneavoastră.

Lungimea de undă 755 nm are o absorbție în melanină de 3 ori mai mare comparând cu absorbția în hemoglobină. Acest lucru o face lungimea de undă ideală pentru revitalizarea pielii, reducând în același timp riscul de sângerare punctiformă și minimizând potențialele efecte secundare.

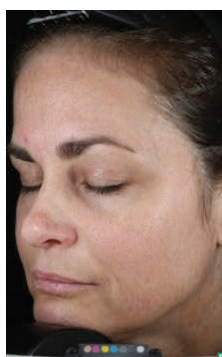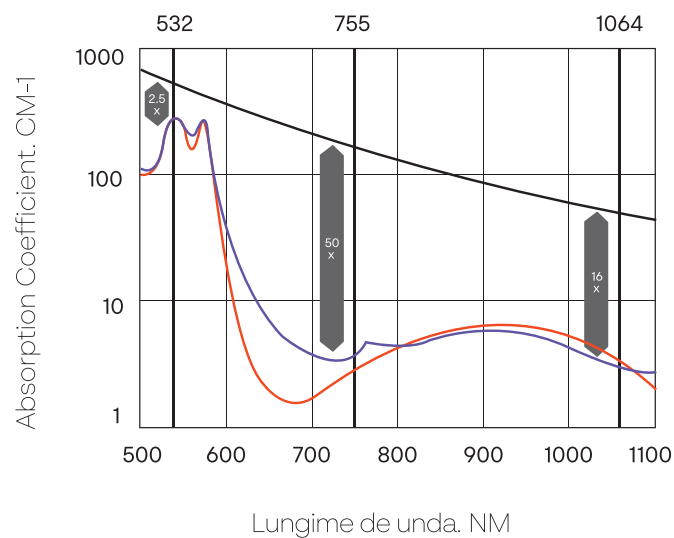

Înainte de tratament



Imediat după



După 3 ore



După 24 de ore

Aceste fotografii înainte și după sunt ale unui pacient tratat cu dispozitivul PicoSure de la Cynosure, nu cu dispozitivul PicoSure Pro. Dispozitivul PicoSure Pro are aceiași parametri ca și dispozitivul PicoSure și, astfel, deși rezultatele individuale variază, sunt așteptate rezultate similare.

Opiniile *Expertilor*/

Cu mai multă putere, indicații noi, tratamente mai rapide și flexibilitate sporită, echipamentul PicoSure Pro duce tehnologia de tip picosecunde la niveluri de performanță fără precedent.



“Când vine vorba de PicoSure Pro, am fost foarte impresionat de putere. Puterea suplimentară îmi permite să folosesc o dimensiune mai mare a spotului și să obțin o penetrare mai profundă. Îmi place, de asemenea, posibilitatea de a regla fluența. Acest lucru îmi permite să personalizez fiecare tratament pentru a răspunde mai bine nevoilor specifice ale pacienților mei.”

Dr. Emil Tanghetti, dermatolog



“Îmi place noul PicoSure Pro pentru tratarea tipurilor de piele mai închisă la culoare și pentru tratarea decolorării. Posibilitatea de a regla fluența permite cu adevărat să perfecționez fiecare tratament. Este dispozitivul meu preferat pentru tratarea leziunilor pigmentare.”

Dr. Nazanin Saedi, dermatolog



“Un pacient, care prezenta simptome depresive la prima sa vizită în clinică din cauza leziunilor pigmentare de pe față, a urmat o serie de tratamente PicoSure. După finalizarea acestora, leziunile pigmentare s-au ameliorat semnificativ, iar manifestările depresive au dispărut. În prezent, este mult mai optimist în privința vieții, iar eu sunt recunoscător că am putut contribui la această îmbunătățire.”

Dr. Teppei Sakai, dermatolog

PicoSure Pro este mai mult decât un simplu laser. Este un echipament care vă permite să *îmbunătățiți viața pacienților*.

100% satisfacția pacienților

**Înainte și după
3 tratamente**

Courtesy of Dr. Kentaro Oku



**Înainte și după
3 tratamente**

Courtesy of Dr. Kentaro Oku



**Înainte și după
3 tratamente**

Courtesy of Dr. Emil Tanghetti



Aceste fotografii înainte și după sunt ale unui pacient tratat cu dispozitivul PicoSure de la Cynosure, nu cu dispozitivul PicoSure Pro promovat aici. Dispozitivul PicoSure Pro are aceiași parametri ca și dispozitivul PicoSure și, astfel, deși rezultatele individuale variază, sunt de așteptat rezultate similare.

Specificații și Accesorii

Lungime de undă	755nm
Lățimea pulsului	500-900 ps
Energia pulsului	300 mJ ± 20%
Fluența maximă	6.37 J/cm ²
Dimensiuni spot	Aplicator Zoom: 2.0 mm-6.0 mm Aplicatori: 5.0mm, 6.0 mm, 8.0 mm, 10.0 mm
Sursă de alimentare	200-240 V~, 4.5 kVA, 50/60 Hz, Single Phase
Instalație electrică	Priză dedicată de 30 A
Emisii termice maxime	15,500 Btu/h
Dimensiuni (H x W x D)	43 in (109 cm) x 22 in (56 cm) x 42 in (107 cm)
Greutate	375 lb (171 kg)

PicoSure Pro 755 cu lentilă plată este aprobat FDA pentru tratarea leziunilor pigmentare la tipurile de piele I-VI. PicoSure Pro 755 cu lentila Platinum Focus este aprobat FDA pentru tratarea cicatricilor de acnee și a ridurilor la tipurile de piele I-IV. Rezultatele obținute de pacienți vor varia.





Medisk!n

APARATURA MEDICAL-ESTETICA

Adresă: Str. Melodiei 23, Sector 2, București

Telefon: +40.752.334.433 | Email: office@mediskin.ro

Web: www.mediskin.ro