



Resurfacing
non-ablative,
redefinit.



CYNOSURE®
LUTRONIC®



Obține rezultate eficiente

Sistem de Răcire Integrat

Obțineți rezultate clinice eficiente cu sistemul integrat de răcire. Sistemul de răcire integrat MOSAIC 3D permite medicilor să trateze în condiții de siguranță și cu eficiență ridicată zonele sensibile, precum zona peroculară și periorală.

Răcirea cu aer integrată circulă prin aplicator și este direcționată către capetele unice din safir cu compresie la rece, care asigură simultan răcirea și compresia țesuturilor. Această sinergie contribuie la reducerea durerii, eritemului și edemului și este concepută pentru a optimiza eficacitatea tratamentului, siguranța procedurii și confortul pacientului.



Aplicator din safir cu compresie la rece




În acțiune răcirea cu aer integrată în aplicator




Adăugarea unei noi dimensiuni prin tehnologia 3D Controlled Chaos Technology™

Tehnologia 3D Controlled Chaos Technology (3D CCT) adaugă o nouă dimensiune sistemului patentat de scanare CCT. Prin optimizarea distribuției și a profunzimii microfasciculelor cu diferite adâncimi, 3D CCT contribuie la reducerea riscului de acumulare termică excesivă, permițând creșterea volumului de coagulare per puls („stamp”), fără a compromite siguranța procedurii.*

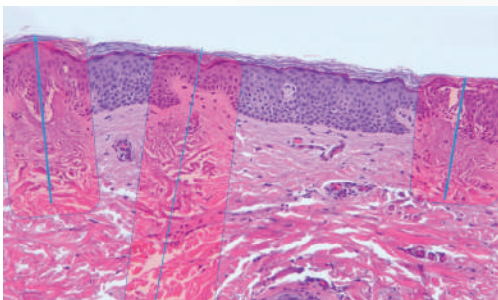

Histologie 3D CCT

*date aflate în arhiva producătorului

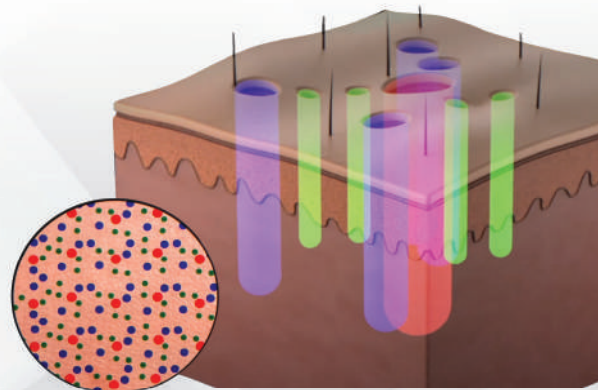

Beneficii pentru pacient și pentru practica medicală



Tehnologia 3D CCT induce în mod eficient coagularea la nivelul dermului mediu, protejând în același timp țesuturile și limitând agresiunea termică.



Timpe de recuperare redus, asociat cu rezultate clinice îmbunătățite*.



Tips-urile cu compresie la rece, asociate sistemului de răcire cu aer, optimizează confortul pacientului pe parcursul procedurii.



Rezultatele includ o îmbunătățire semnificativă a texturii cutanate, cu beneficii evidente în special în arile periculare și periorale.



Poate fi utilizat complementar, în sinergie cu alte proceduri.



O soluție completă de resurfacing, utilizată ca tratament de sine stătător, cu potențial ridicat de rentabilitate a investiției (ROI).

Pacienți reali. Probleme reale. *Rezultate cu impact major.*

Courtesy of Robert Murgia, DO



Înainte și după 2 tratamente

Courtesy of Amy Taub, MD




Înainte și după 2 tratamente

Courtesy of Robert Murgia, DO



Înainte și după 2 tratamente

Courtesy of Amy Taub, MD

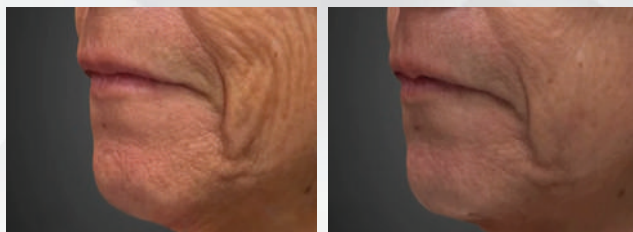

Înainte și după 2 tratamente



Diferențiați-vă *serviciile*

MOSAIC 3D creează o nouă „pânză” la nivel cutanat prin stimularea neocolagenezei și neoelastogenezei în dermul mediu, ducând la o piele revitalizată și mai luminoasă*.

Datorită rolor metalice îmbunătățite și noilor tips-uri din safir, MOSAIC 3D integrează tehnicile de rulare și „stamping” într-o singură platformă laser.

Datorită răcirii cu aer, tehnica de rulare pe suprafața pielii permite o acoperire eficientă și o eficacitate remarcabilă, în timp ce tehnica stamping, cu tehnologia CCT 3D remodelează colagenul din zonele mai greu accesibile.

MOSAIC 3D reprezintă o platformă laser fracționată extrem de precisă și adaptabilă, care oferă un grad avansat de control și personalizare. Gama variată de tratamente permite o utilizare dinamică, susținând dezvoltarea continuă și diversificarea serviciilor din practica dumneavoastră.

*date aflate în arhiva producătorului





Suntem *partenerul* dumneavoastră
de încredere în acest parcurs./

Tehnologie

Știință orientată spre viitor.
Inovații cu valoare clinică dovedită.
Tehnologii Controlled Chaos 3D și 2D.

Produs

Dovezi clinice solide.
Tehnologie îmbunătățită
de cea mai înaltă calitate.

Dezvoltarea practicii

Consultanți experți din industrie.
Focus pe creșterea și dezvoltarea
afacerii dumneavoastră.

Specificații

| | |
|---|---|
| Tip laser | 1550nm, Er: Glass |
| Sistem de livrare laser | fibră optică cu aplicator |
| Energie per puls | 4–70 mJ |
| Rată de puls | până la 447,4 Hz |
| Sistem de răcire | răcire cu aer integrat |
| Compresie la rece Tips-uri din safir | Circular: până la 12 mm diametru Dreptunghiular: până la 8 × 20 mm Pătrat: până la 20 × 20 mm |
| Controlled Chaos Technology™ | disponibilă exclusiv în 2D și 3D |
| Dimensiuni și greutate | 16" lățime × 23" adâncime × 69" înălțime; 73 lbs (33 kg) |
| Cerințe electrice | AC 100–240 V, 50/60 Hz Siguranță: AC 125 V / 6,3 A Putere maximă: 350 VA |

Medisk!n

Adresă: Str. Melodiei 23, Sector 2, București

Telefon: +40.752.334.433 | Email: office@mediskin.ro

Web: www.mediskin.ro